


Pflegebett AURA



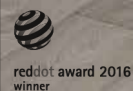


reddot design award
winner 2016

 GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



„ Designing a product
is designing a
relationship“

Steve Rogers

Funktionalität in Vollendung	6
Mobilisierend und schützend	9
Liegeflächen	10
Integrierte Bettverlängerung	11
Das passende Bett für jede Anforderung	12
Integrierte Bettzeugablage	14
Ausstattungen und Optionen	15
Technische Angaben	15
Bettfronten	16
Auszug aus dem Zubehörsortiment	17
Holzreplikationen	18
Lederkollektion	18
Stoffkollektion	19



EINFACHHEIT im Extremen wird zu ELEGANZ

Jon Franklin

Das puristische Design des Premium-Pflegebettes AURA überzeugte bereits die Juroren namhafter Design-Gremien, wie dem Red Dot und German Design Award

Das Niedrigpflegebett verbindet auf vortreffliche Weise Design, Funktion und Sicherheit. Die schlichte äußere Erscheinung lässt die Vielfalt des AURA nicht erahnen.

Profitieren Sie von der langfristigen Beständigkeit des begehrten Preisträgers und erlangen Sie Planungssicherheit und kreativen Freiraum für Ihre Projekte.



AURA

Funktionale Vielfalt im Einklang mit erstklassigem Design



Das formschöne Niedrigpflegebett bietet mit vielseitigen Funktionen besten Komfort und höchste Sicherheit in der Pflege .



Insbesondere sturzgefährdete Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von der Niedrigposition (1) des AURA, in der das Verletzungsrisiko in Folge eines Sturzes aus dem Bett durch die geringe Betthöhe deutlich minimiert wird .

Die Transferposition (2) erweitert das Niedrigpflegebett um eine optimierte Zwischenhöhe zum bequemen Ein- und Ausstieg auf Sitzhöhe . Das kopfseitige Seitengitterelement ist als stabile Mobilisierungshilfe universell einsetzbar und bietet zusätzliche Unterstützung und erhöhte Sicherheit beim Aufstehen oder zu Bett gehen .




Die Position der Arbeitshöhe (3) steigert die Ergonomie im Pflegeprozess und ermöglicht Pflegenden, eine aufrechte und Rücken schonende Haltung bei der täglichen Versorgung Pflegebedürftiger einzunehmen .



In der Komfort-Sitzposition (4) profitieren Bewohnerinnen und Bewohner von einer bequemen, aufrechten Sitzhaltung mit positivem Einfluss auf die räumliche Orientierung . Für mehr Vitalität und eine bessere Kommunikation .



Die Trendelenburg-Position (5) kann zur Stabilisierung von Kreislaufproblemen beitragen . Die elektromotorische Verstellung in die Kopftieflagerung ermöglicht dem qualifizierten Personal im Notfall schnelles Handeln .

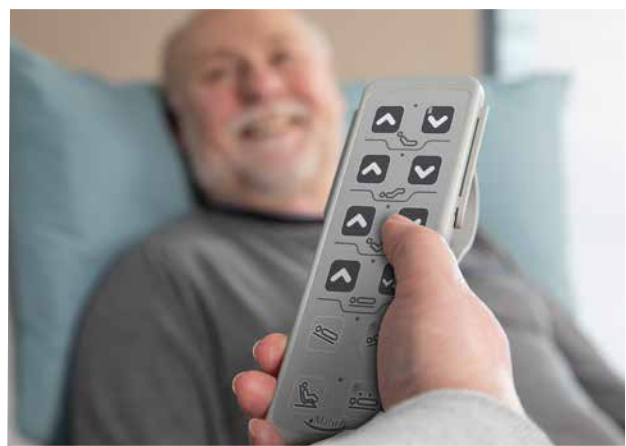





Mobilisierend und schützend

Die Vorzüge des vertikal versenkbaren Seitengittersystems bestehen in der kompakten Bauform, die keinen seitlichen Platzbedarf erfordert sowie der außerordentlichen Stabilität der präzise verarbeiteten Elemente aus eloxiertem Aluminium. Ein hochwertiger Massivholz-Handlauf mit eingefasster Designleiste unterstreicht die hohe Produktqualität des Premium-Pflegebettes AURA.

„ Die Seitengitter sind beim AURA sehr dezent angebracht. Durch die Kombination von Holz und Aluminium strahlt es Wärme und Eleganz aus.“

Red Dot Design Award



Die innovative Einhandbedienung ermöglicht eine schnelle und komfortable Absenkung der Sicherungselemente.

Das vertikal versenkbare Seitengittersystem

Standardmäßig verfügt das AURA über die neue Version des vertikal versenkbaren Seitengittersystems mit komfortabler Einhandbedienung.


Die kopfseitig montierten Seitengitterelemente stellen in aufgerichteter Position eine stabile Mobilisierungshilfe (1) bereit und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv beim sicheren Aufstehen oder zu Bett gehen. Durch die optimierte Einteilung von Liegefläche und Seitengittersystem ist ein sicherer und komfortabler Bewohnertransfer ohne unnötige Mobilisierungsmaßnahmen durch die Pflegekraft gegeben.

Abgesenkt in die Ruheposition (2) ist das Seitengitter bei Bedarf schnell aktivierbar und ein barrierefreier Zugang zum Bett jederzeit gewährleistet.

Die Position der erweiterten Sturzprophylaxe (3) wirkt einem unbewussten Herausrollen durch die haptische Begrenzung der Liegefläche entgegen und bietet dem Personal Unterstützung bei der Umlagerung.

Falls die Besicherung von Bewohnerinnen und Bewohnern unvermeidlich ist, bietet das vertikale Seitengittersystem zwei Höhenpositionen für einen effektiven Schutz (4).

Liegeflächen

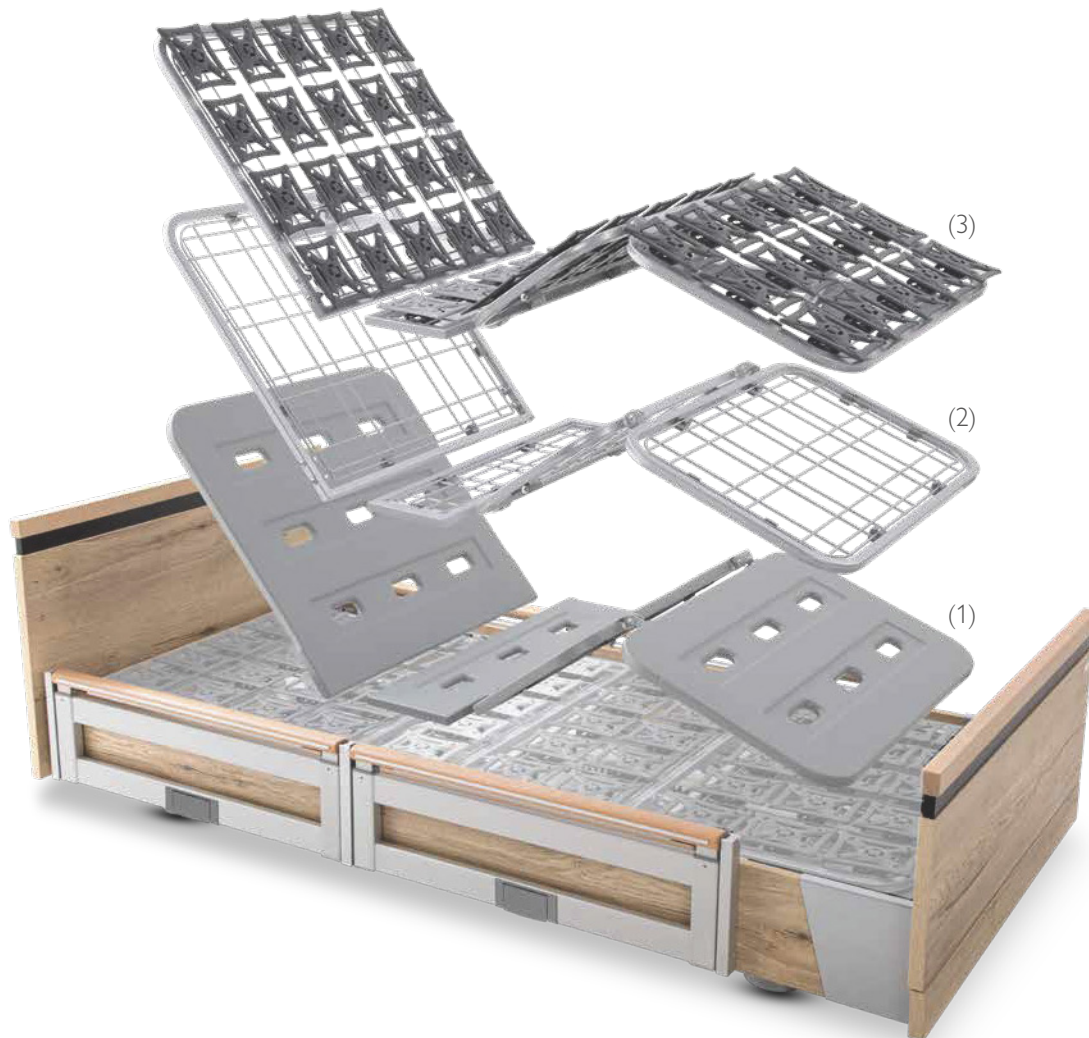

Die 4-geteilten Liegeflächen mit Matratzenausgleich bieten hervorragende Ergonomie und hohen Komfort . Der Rückzug der Rückenlehne im Verstellablauf wirkt dabei druckentlastend auf den Gesäßbereich .

Einfaches Handling und schnelle Reinigung der entnehmbaren Kunststoffauflagen bietet die ABS-Liegefläche (1) .

Als Basisvariante verfügt die Metallgitter-Liegefläche (2) über hervorragende Belüftungseigenschaften und ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransfer .

Die flexiblen Federelemente der Komfort-Liegefläche (3) passen sich optimal an den Körper an und eignen sich zur Dekubitus-Prophylaxe .



Integrierte Bettverlängerung

Wechselnde Bewohnerinnen und Bewohner erfordern flexible Lösungen. Die integrierte Bettverlängerung ermöglicht auch großen Menschen optimalen Liegekomfort.

Mittels Schnellentriegelung ist die Liegefläche bei Bedarf sekundenschnell werkzeuglos erweiterbar. Im ausgezogenen Zustand bleiben alle Bettfunktionen uneingeschränkt nutzbar.

Das System ist in zwei Stufen um 10cm oder 20cm teleskopierbar und kommt dabei ohne zusätzliche Protektoren aus. Bei Verlängerung um 20cm empfiehlt sich die Verwendung des optional erhältlichen Matratzeinlegers.



Das passende Bett für jede Anforderung



AURA

Das preisgekrönte Niedrigpflegebett AURA im klassischen Holzdekor bietet formschönes Design in Verbindung mit höchster Funktionalität. Hochwertige Aluminium-Seitengitterelemente mit Massivholzhandlauf und komfortabler Einhandbedienung unterstreichen die Wertigkeit des prämierten All-rounders. Die verdeckten Laufrollen mit Zentralbremse und ein moderner Holzumbau mit dezent platzierten Designelementen verleihen dem AURA einen äußerst wohnlichen Charakter.

- Holzumbau Halifax Eiche natur (aufpreispflichtiges Sonderdekor)
- Bettfronten V600, Inlay schwarz*
- integrierte Bettzeugablage*
- vertikal versenkbares Seitengitter mit Einhandbedienung, beidseitig geteilt, mit Massivholz-Handlauf

- Holzumbau Halifax Eiche natur (aufpreispflichtiges Sonderdekor)

Bettfronten V600, Inlay schwarz* • kopfseitige Mobilisierungshilfe mit Einhandbedienung und Massivholz-Handlauf
Das AURA LR überzeugt durch seine Stärken in der Mobilität. Mit lauffreudigen 100mm Doppellaufrollen und Zentralbremse ist das Niedrigpflegebett äußerst wendig. Das AURA Niedrigpflegebett ist in den folgenden Seitengitterausführungen erhältlich:



- ohne Seitengitter
- vier Seitengitterelemente rundum
- mit kopfseitiger Mobilisierungshilfe

* optionale Sonderausstattung

AURA „Loft“

Das AURA im wohnlichen Design eines hochwertigen Polsterbettes: mit der aufwendigen Ledersteppung ist das Niedrigpflegebett AURA in der Designvariante „Loft“ ein wahrer Blickfang. Hier trifft Funktionsvielfalt auf Extravaganz. Auch in der Variante AURA LR „Loft“ mit Doppelaufrollen und Zentralbremse sowie vertikal versenkbaren Seitengittern erhältlich.



- Lederdesign Lavendel, Rautensteppung anthrazit
- Bettfronten V800

Die hochwertig verarbeitete Ledersteppung in der Designvariante „Loft“ ist in vielen Farbvarianten erhältlich (siehe Seite 19).



- Lederdesign Schiefer, Rautensteppung grau
- Bettfronten V850
- kopfseitige Mobilisierungshilfe mit Einhandbedienung und Massivholz-Handlauf

Die dünnere Polsterung der Bettfront V850 lässt das AURA „Loft“ etwas zierlicher erscheinen. Die teleskopierbare Mobilisierungshilfe bietet Bewohnerinnen und Bewohnern eine komfortable Unterstützung und erweiterte Sicherheit beim Aufstehen oder zu Bett gehen.



Integrierte Bettzeugablage

Praktisch, hygienisch und leicht bedienbar: die optional erhältliche Bettzeugablage erleichtert dem Pflegepersonal die Arbeit und vermeidet den Kontakt der Bettwäsche mit dem Fußboden .



Ausstattungen und Optionen

	AURA	AURA LR
Niedrigposition	25cm	26cm
Arbeitshöhe	82cm	82cm
Sturzprophylaxe	•	•
Transferposition	•	•
Komfort-Sitzposition	•	•
Trendelenburg-Lagerung (sperrbar)	•	•
CPR-Notabsenkung	◦	◦
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•
Metallgitter-Liegefläche	•	•
Komfort-Liegefläche	◦	◦
ABS-Liegefläche ¹	◦	◦
Bettverlängerung 10cm/20cm	•	•
Bettzeugablage	◦	◦
Doppelaufrollen	50mm	100mm
Verdeckte Laufrollen	•	-
Zentralbremse	•	•
Seitengitter EVGS (mit Einhandbedienung)	•	•
Antriebssystem mit Schutzkleinspannung	•	•
Handschalter mit Sperrfunktion	•	•
Unterbettbeleuchtung	◦	◦

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

Maße und Gewichte	AURA /AURA LR	AURA „Loft“
Liegefläche	90x200cm	90x200cm
Außenmaße	102,5x206cm	107x218cm
Sichere Arbeitslast	max . 225kg	max .225kg
Unterfahrbarkeit	13/15cm	13cm
Gesamtgewicht	ca . 140kg	ca . 140kg

¹ nur für Standard-Liegeflächengröße 90x200cm

Bettfronten Classic

Die charakteristische AURA Bettfront mit schwarz oder silber abgesetztem Inlay und Zierleiste am Fußende steht in auch in einer offenen Variante (nur hohe Form) in verschiedenen Holzdekoren zur Auswahl .

Serie V600



Abbildungen in Halifax Eiche (aufpreispflichtiges Sonderdekor)

Polsterbettfronten

Serie V805



Serie V825




Serie V835



Serie V845



Auszug aus dem Zubehörsortiment

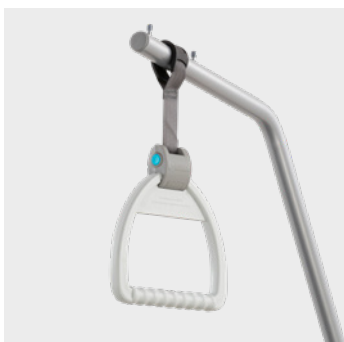


Aufrichter



Wandabweiser



Bettlampe CURA

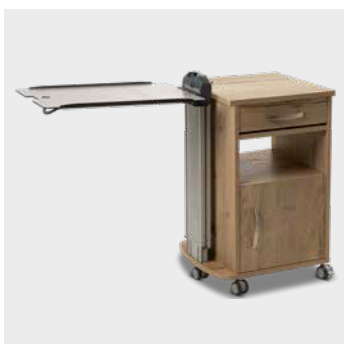

Nachtschrank WIII



Nachtschrank WIV



Server WXL

Unser umfangreiches Zubehörsortiment finden Sie in einem gesonderten Katalog .

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post . Alternativ steht die PDF-Datei zum Download unter <https://bettenmalsch.com/download> bereit .



Holzreplikationen



Ahorn




Buche




Eiche hell



Eiche Sand

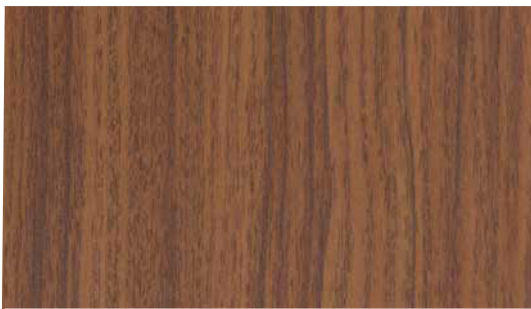

Nussbaum

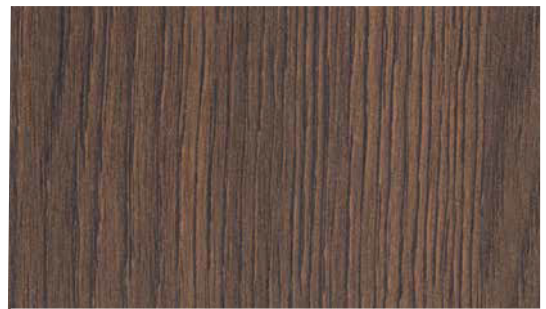

Eiche dunkel

Bei der Dekorauswahl handelt es sich um Reproduktionen . Eine farbverbindliche Dekorauswahl ist nur am Originalmuster möglich . Sonderdekore sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich .

Lederkollektion




VALENCIA White 9486



VALENCIA Leinen 1049



VALENCIA Taupe 0034

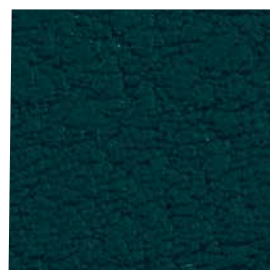

VALENCIA Teal 2119



VALENCIA Cashmere 2117



VALENCIA Port 2062




VALENCIA Auster 4040



VALENCIA Perle 4045

Stoffkollektion

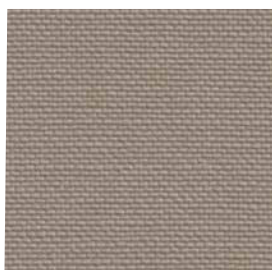


SILVERTEX Macadamia




SILVERTEX Sterling



TIBA X 1111

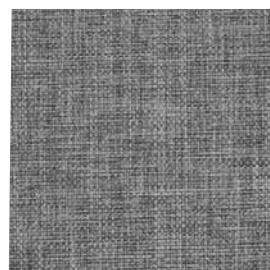

TIBA X 8111

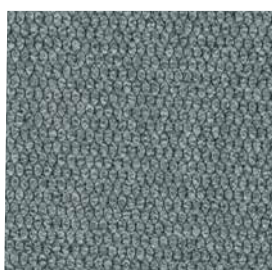

BROOKS 6550



BROOKS 1553



MALTA 2003



MALTA 7002

Unsere Leder- und Stoffkollektionen sind geeignet für das Gesundheitswesen . Alle gezeigten Muster sind wisch-beständig, fleckenabweisend, Desinfektionsmittel beständig, viruzid, antibakteriell und schwer entflammbar (B1) .

Die farbverbindliche Leder-/Stoffauswahl ist nur am Originalmuster möglich . Wir behalten uns die Verwendung ähnlicher Alternativstoffe anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit vor .

Vertriebspartner Österreich



pap-innovative care design GmbH
Bahnweg 18
9220 Velden am Wörthersee
T: +43 664 21 00 384
E: info@pap-icd.com
I: www.pap-icd.com

Malsch GmbH
Rohbergstr . 9 | D-36208 Wildeck
Tel .: +49 (0) 6626 915-100
Fax: +49 (0) 6626 915-116
E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

